



2025

CARE LIFE, SERVE SCIENCE



建诺为生物技术(江苏)有限公司
GENEVER BIOTECHNOLOGY (JIANGSU) CO., LTD.



ISO9001体系认证



ISO13485体系认证



国家高新技术企业



液体处理系列产品

- 移液与分装耗材
- 离心与样品处理
- 液体存储与运输

- ▶ 吸头系列

▶ 血清移液管

▶ 试剂槽

▶ 巴氏吸管
- ▶ 微量离心管

▶ 锥形离心管
- ▶ 试剂瓶

▶ 培养基方瓶

▶ 样品管

移液与分装耗材 HOT

核心功能：实现液体试剂的精准移取、分配与操作，支持实验中多场景的液体转移需求。


▶ 吸头

- 规格
10μl、20μl、50μl、100μl、200μl、300μl、1000μl、1250μl、5ml、10ml；
袋装/盒装/叠装
- 特点
可提供滤芯款和低吸附款
适配性/密封性/柔韧性高
无热原，无内毒素
灭菌产品灭菌有效性SAL 10⁻⁶
- 用途
科研实验室各类微量液体移取



▶ 血清移液管

- 规格
1ml、2ml、5ml、10ml、25ml、50ml
- 特点
透明聚苯乙烯材质
刻度清晰，双向刻度
适配大部分电动移液器
- 用途
常用于细胞培养中血清、培养基等
中体积液体的转移

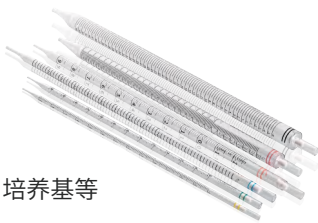

▶ 试剂槽

- 规格
25ml、50ml
- 特点
单渠V型底设计；可搭配多通道移液器，进行批量移液
- 用途
高通量实验中试剂的临时盛放与分配



离心与样品处理 HOT

核心功能：支持不同体积样品的离心分离、液体配制/储存/转移，也可作为反应承载及样品处理与收集的容器。

▶ 微量离心管

- 规格
0.6ml、1.5ml、2.0ml、5ml、10ml；无菌/非无菌
- 特点
透明/棕色可选
管体刻度设计
配有磨砂书写区
无热原，无内毒素，无DNA/RNA酶
- 用途
与微型离心机配套使用，用于微量试剂的分离离心



▶ 锥形离心管

- 规格
15ml、50ml；9000×g/12000×g
- 特点
管身带刻度及白色书写区
预灭菌处理
无热原，无内毒素，无DNA/RNA酶
- 用途
实验室中较大体积样品的分离离心、收集、储存及液体转移



核心功能：保障液体试剂/样品的长期稳定存储与安全运输，避免污染或泄露损失。

试剂瓶

- 规格
8ml、15ml、30ml、125ml、250ml、500ml、1000ml；
无菌/非无菌

- 特点
本色与棕色可选
棕色有效避光
广口/窄口可选
双材质：PP/HDPE



- 用途
储存、盛放化学试剂、溶液或样品的容器

样品管（螺帽管）

- 规格
0.5ml、1.5ml、2ml；
无菌/非无菌

- 特点
带O型密封圈，管盖颜色可选
可立/锥形底可选
平盖/连盖款式可选
无DNase/RNase，无热原



- 用途
用于各类生物样本或试剂的分离离心、密封储存及短期运输等

培养基方瓶

- 规格
30ml、60ml、125ml、250ml、500ml、1000ml；PET/PETG材质

- 特点
瓶体高度透明，瓶身带刻度
无热原，无内毒素
预灭菌处理
提供定制化服务

- 用途
常用于血清、细胞培养液的分装、储存和运输



细胞培养系列产品

细胞培养与扩增

- ▶ 细胞培养板/瓶/皿
- ▶ 三角摇瓶
- ▶ 胎牛血清
- ▶ 青链霉素混合液

细胞传代与计数

- ▶ 胰酶细胞消化液
- ▶ 细胞消化终止液
- ▶ 台盼蓝染液（0.4%）

细胞冻存

- ▶ 二甲基亚砜
- ▶ 冻存管
- ▶ 程序降温盒/冻存盒

核心功能：为细胞提供适宜的体外生存环境、营养支持及污染防护，满足不同规模的细胞扩增需求。

细胞培养板

- 规格
6孔、12孔、24孔、48孔、96孔
- 特点
表面TC处理
独立包装
无热原，无内毒素，无DNA/RNA酶
预灭菌处理
- 用途
常用于以细胞为载体或对象的实验



细胞培养瓶

- 规格
T25、T75、T125、T225；密封盖/透气盖
- 特点
无热原，无内毒素，无DNA/RNA酶
预灭菌处理
瓶身刻度清晰
- 用途
主要用于细胞的传代与大规模扩增



细胞培养皿

- 规格
35mm、60mm、100mm、150mm
- 特点
表面TC处理
无热原，无内毒素，无DNA/RNA酶
预灭菌处理
- 用途
适合中等规模细胞培养需要开放操作的细胞实验



三角摇瓶

- 规格
125ml、250ml、500ml、1000ml、1500ml、3000ml、5000ml；PC/PETG；透气盖
- 特点
表面TC处理
独立包装
预灭菌处理
瓶口尺寸符合国际SBS标准
- 用途
可用于悬浮细胞培养或需振荡培养的微生物的大规模扩增



Genever®胎牛血清 (Fetal Bovine Serum)

- 概述
Genever®胎牛血清是源自内蒙古优质牧场采血基地，主要为细胞培养与增殖提供必需营养
- 规格
500ml；特级胎牛血清/金牌胎牛血清
- 特点
优质血清来源
完整文件追踪
6-8月胎龄胎牛采血
GMP净化车间生产



青链霉素混合液 (100×)

- 概述
本品是专门用于细胞培养的双抗，预防体外细胞培养过程中的微生物污染
- 规格
100ml
- 特点
本品经过滤除菌，可以直接添加到细胞培养液内，按照100倍稀释使用即可



细胞传代与计数 HOT

核心功能：通过消化、终止、缓冲及染色等关键操作，实现贴壁细胞的高效传代

▶ 胰酶细胞消化液

概述

本产品含有0.25%胰酶，是一种用于细胞或组织消化的生物试剂

规格

100ml；含EDTA/不含EDTA；
含酚红/不含酚红

用途

该消化液经过除菌过滤，可以直接用于细胞或组织的消化



▶ 台盼蓝染液 (0.4%)

概述

本产品是细胞活性染料，常用于检测细胞膜的完整性与细胞的存活率

规格

100ml

用途

台盼蓝染色是组织和细胞培养中最常用的死细胞鉴定染色方法之一，常用于细胞计数



▶ 细胞消化终止液

概述

本产品为胰酶消化细胞时终止消化的试剂，含抗凝血酶III（丝氨酸蛋白酶抑制剂），可抑制胰酶消化细胞

规格

100ml

用途

本产品经过除菌过滤，可直接用于细胞实验；成分含有钙镁离子，有影响的实验请勿使用



细胞冻存 HOT

核心功能：通过保护剂与耐超低温容器，实现细胞、组织等生物样本的长期稳定保存

▶ 二甲基亚砜 DMSO (细胞级)

概述

DMSO可以保护细胞免受冰晶引起的机械性损伤，主要用于细胞冻存液的配置

规格

100ml

用途

本品为无菌产品，可直接用于冻存液的配置



▶ 冻存管

规格

1ml、1.8ml、4.5ml；内旋/外旋

特点

可耐受温度范围：-196℃至121℃
无热原，无内毒素，无DNA/RNA酶
预灭菌处理

用途

主要用于低温保存生物样本的容器



微生物检测系列产品

样品采集与前处理

微生物培养器皿

微生物培养操作工具

▶ 无菌采样袋/均质袋

▶ 细菌培养皿

▶ 一次性接种环

▶ 一次性塑料涂布棒

样品采集与前处理 **HOT**

核心功能：用于微生物检测中样本的无菌采集、均质处理等前序操作

▶ 无菌采样袋/均质袋

- 规格
12×18cm; 20×22cm; 30×32cm
- 特点
密封性强
可站立设计
预灭菌处理
无热原, 无内毒素, 无DNA/RNA酶
- 用途
用于收集和存储样本的工具



微生物培养器皿 **HOT**

核心功能：直接用于微生物的分离、培养与观察

▶ 细菌培养皿

- 规格
90mm
- 特点
堆叠设计
预灭菌处理
无热原, 无内毒素
无DNA/RNA酶
- 用途
适合实验室接种、划线、分离细菌的操作




微生物培养操作工具 **HOT**

核心功能：用于微生物接种、涂布等实验操作


▶ 一次性接种环

- 规格
10μL
- 特点
独立纸塑包装
预灭菌处理
无热原, 无内毒素
无DNA/RNA酶
- 用途
适用于微生物实验室细菌平板划线, 传代, 菌液菌株挑取, 用于纯化菌种

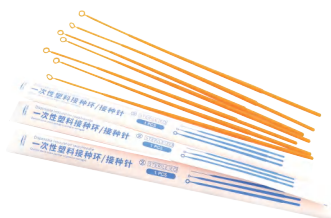

▶ 一次性塑料涂布棒

- 规格
L型
- 特点
独立纸塑包装
预灭菌处理
无热原, 无内毒素
无DNA/RNA酶
- 用途
用于细菌平板涂布实验和细胞培养推板实验等

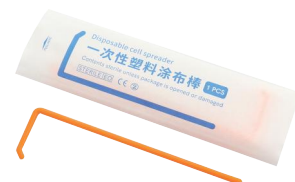



生物检测系列产品

样品处理与储存

PCR系列产品

ELISA系列产品

- ▶ 深孔板
- ▶ 封板盖

- ▶ PCR管
- ▶ PCR96孔板
- ▶ PCR384孔板
- ▶ 封板膜

- ▶ 酶标板

样品处理与储存 **HOT**

▶ 深孔板

规格
1.2ml方/圆孔；2.0ml圆孔；2.2ml方孔；底型：锥底和圆底

特点
数字、字母标识
符合国际标准尺寸（SBS）
无DNA/RNA酶

用途
主要用于样品收集，体外生长室和实验室液体的
贮存，适用于多道移液器及自动化移液工作站



ELISA系列产品 **HOT**

▶ 酶标板

规格
透明/黑色；不可拆卸/可拆卸

特点
数字、字母标识
无热原，无DNA/RNA酶
96孔板，可拆卸型为8孔条组合

用途
主要用于ELISA反应后的蛋白检测，配合酶标
仪使用



PCR系列产品 **HOT**

▶ PCR管

规格
0.1ml、0.2ml、0.5ml；单管/八联管；透明/白色

特点
热传导效应好
密封性好
无热原，无DNA/RNA酶

用途
广泛应用于（q）PCR 实验，适用于标准
PCR仪96孔加热模块



▶ PCR384孔板

规格
透明/白色

特点
数字、字母标识
传热效率高
无热原，无DNA/RNA酶

用途
主要用于生物技术实验中添加样品，与大多
数384模块PCR和测序仪器兼容



▶ PCR96孔板

规格
0.1ml、0.2ml；无裙边/半裙边/全裙边

特点
数字、字母标识；传热效率高；无热原，无DNA/RNA酶

用途
主要用于支持高通量核酸扩增，通过96孔可实现多样本的同步处理





免疫检测系列产品

样品前处理

ELISA

Western Blot

- ▶ 细胞筛网
- ▶ 组织&细胞裂解液
- ▶ 总蛋白定量BCA试剂盒

- ▶ ELISA试剂盒
- ▶ ELISA辅助试剂

- ▶ Genever®转印膜

样品前处理 **HOT**

细胞筛网

规格

40μm、70μm、100μm

特点

独立包装

无热原，无内毒素，灭菌有效性SAL 10⁻⁶
适配50ml锥形离心管

用途

常与流式细胞仪配套使用，用于制备流式细胞分选所需的单细胞悬液，也可以用于提取组织中的原代细胞



Western Blot **HOT**

Genever®转印膜

概述

用于蛋白质和核酸的转移和检测过程用到的固相载体

规格

0.45μm、0.22μm；PVDF/NC

特点

优异的蛋白质保留率
出色的灵敏度
低背景
广泛的化学兼容性
高物理强度



ELISA **HOT**

ELISA试剂盒

概述

建诺为 ELISA 试剂盒可特异性定量检测蛋白质，包括细胞因子、趋化因子、生长因子和信号靶点等

规格

48T、96T；即用型/高灵敏

特点

易用：无需额外准备试剂与缓冲液
稳定：多次批内与批间验证
可提供多种靶点、多个种属
适合多种类型生物样本



* ELISA 辅助试剂包含 ELISA 实验的各种辅助试剂。更多产品，详情请咨询销售人员



400-996-8872

建诺为生物技术(江苏)有限公司

邮箱: info@genever-bio.com

官网: www.genever-bio.com

地址: 泰州市医药高新技术产业开发区综合保税区三期三号标准厂房A栋



扫码关注